

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Masážní křeslo Hanscraft Levante



Děkujeme vám za výběr našeho výrobku - masážního křesla Levante pro doplnění potřeb vašeho životního stylu. Přečtěte si prosím důkladně tento manuál pro správné používání a ovládání tohoto výrobku. Tento uživatelský manuál by jste si měli uschovat pro pozdější nahlédnutí. Tento výrobek je určen pouze pro domácí používání.

.....

OBSAH

Bezpečnostní upozornění.....	3
Popis výrobku.....	4
Ovládání křesla.....	5
Řešení problémů.....	7
Specifikace.....	7
Záruka.....	7
Údržba.....	8
Péče a uskladnění.....	8

Bezpečnostní upozornění

Z důvodu snížení rizika zranění se ujistěte, že jste si detailně přečetli tento manuál, obzvláště tuto sekci-bezpečnostní upozornění. Nevhodná manipulace s tímto zařízením může vyústit ve zranění nebo dokonce zapříčinit smrt. Zařízení prosím používejte podle instrukcí, uvedených v tomto manuálu.

Níže vyjmenované osoby musí používání tohoto zařízení konzultovat se svým lékařem:

- osoby s kardiostimulátorem nebo podobným medicínským zařízením.
- osoby s onemocněním srdce.
- osoby s nějakou abnormalitou nebo deformitou páteře.
- osoby s maligním nádorem.
- ženy s menstruací, nebo těhotné.
- osoby podstupující medicínský nebo nemedicínský zákrok.
- osoby s problémy s páteří nebo s různými zraněními.

Výrobek nepoužívejte, pokud je vnější kryt křesla poškozen nebo v případě selhání mechaniky nebo elektroniky v zařízení. Pro otestování nebo opravu zařízení kontaktujte svého prodejce.

Netřepejte nebo nepřevracejte křeslo.

Nepoužívejte nebo neuskładňujte tento výrobek v horkém nebo vlhkém prostředí, jako jsou koupelny, ohříváče atd. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo elektrickému šoku.

Nepoužívejte tento výrobek s ostatními masážními zařízeními.

Zařízení nepoužívejte bez vnějšího krytu.

Na výrobek nepožívejte masti nebo kosmetické krémy.

V případě jakékoliv závady na výrobku kontaktujte prosím vašeho prodejce. Zařízení se nepokoušejte sami opravit.

Tento výrobek není zdravotní pomůcka a nemůže vyléčit vaše onemocnění.

Na křeslo nestoupejte nebo jej nezatěžujte nadměrnou váhou.


Nečistěte výrobek benzenem, nepoužívejte změkčovače nebo alkohol.

V případě závady odpojte napájecí kabel. V opačném případě může dojít z požáru, elektrickému šoku nebo zranění

Křeslo umístěte na rovném a stabilním povrchu, aby nedošlo k jeho převržení.

Jeden masážní cyklus běží po dobu 15 minut. Křeslo prosím nepoužívejte denně déle než 30 minut. Jinak by jste se mohli začít cítit nepohodlně.

Popis výrobku

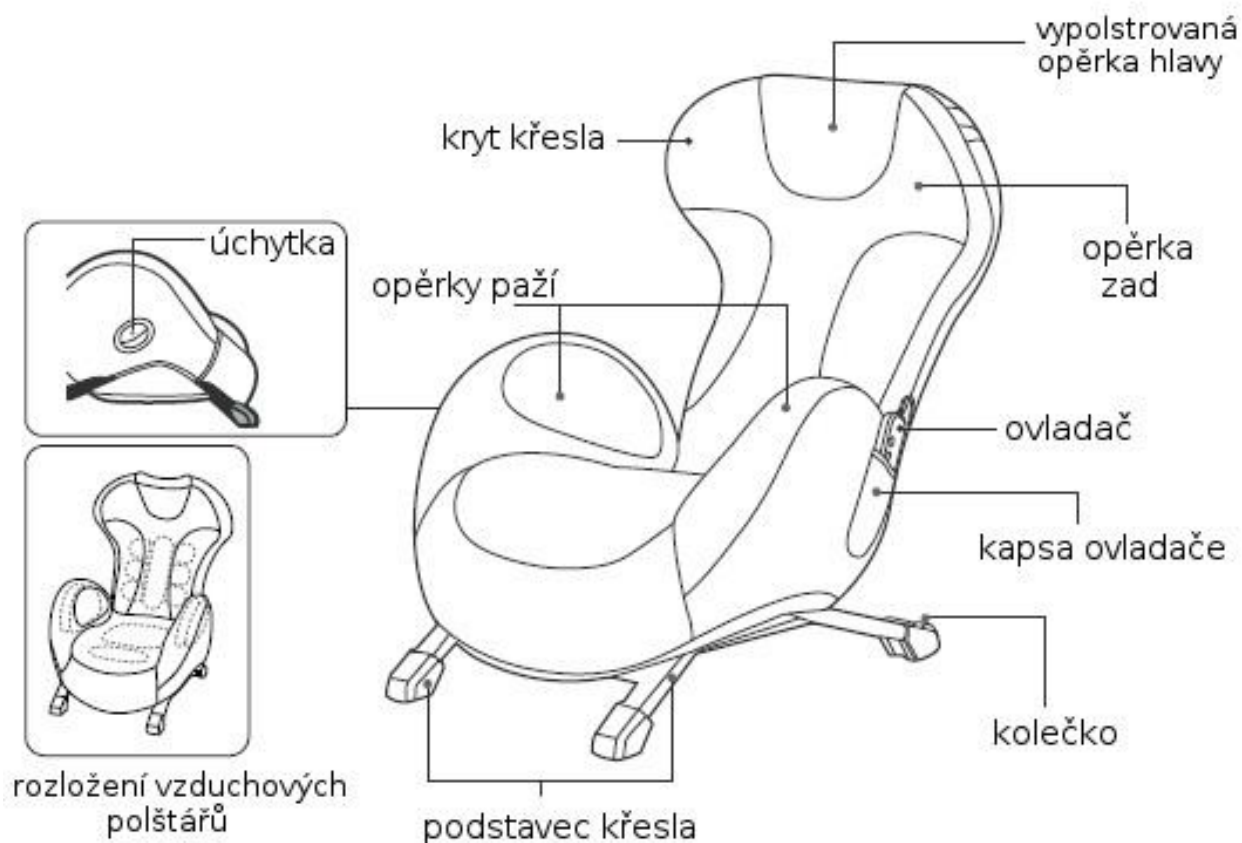

POZNÁMKA:

Tlačítko zastavení křeslo nevypne. Vypněte prosím tlačítko VYP/ZAP pro vypnutí napájení. Do křesla se posad'te co nejdále směrem k opěradlu, a to před samotným zahájením masáže.

Po dokončení masáže zatáhněte vzduchové polštáře zpět do jejich výchozí pozice.

Nestiskněte více než jedno tlačítko současně

Postupné osvětlení se rozsvítí během provozu křesla a vypne po ukončení masáže.

Ovládání křesla

Upozornění: Před samotným používáním se ujistěte, že kabel ovládací jednotky není zlomený. Mohlo by dojít k nehodě nebo zranění. Před samotným použitím křesla se ujistěte že je umístěno na stabilní ploše.



Funkce	Popis
Korekce pánve	Vzduchové polštáře na opěrkách paží a sedáku mohou masírovat pánev a upraví tak nerovnosti v pánevní oblasti.
Beauty tvarování	Vzduchové polštáře hnětou obě strany pánve a tím mohou snížit nadbytečný tuk v oblasti boků a pasu. Vzduchové zádové polštáře masírují vaše svaly a formují oblast pasu.
Protážení	Vzduchové polštáře paží stlačí střídavě každou stranu pánve a tím natáčí váš pas. Pomocí hnětoucí masáže vzduchových polštářů zad protáhnete svaly těla.
Auto	Přeorganizujte výše uvedené funkce a vytvořte si efektivní masážní styl pro vytváření postavy.

Poznámka:

Tento výrobek není určen pro používání dětmi

Nestrkejte prsty do mezery mezi opěradlem a sedadlem, protože může dojít ke zranění.

Nepoužívejte výrobek, pokud je krycí tkanina poškozena

Nepřesunujte výrobek taháním za napájecí kabel. V opačném případě může dojít k poškození.

Časovač

Jednotlivý masážní cyklus probíhá po dobu 15 minut. Pokud chcete provést změnu v průběhu masáže, odpočet časovače je vynulován a nastaví se plných 15 minut.

Křeslo mějte umístěné ve vzdálenosti přinejmenším 1 metru od audio nebo video zařízení.

1. Zkontrolujte, jestli se v krycí tkanině křesla nenachází trhliny nebo díry.
2. Vložte zástrčku do zásuvky.
3. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP, které je umístěno ve spodní části opěradla křesla.
4. Posad'te se do křesla se zády maximálně nataženými.
5. Zatáhněte za úchytka na levé opěrce paže. Upravte úhel náklonu na pohodlnou polohu. Zádové opěradlo křesla je možné nastavit v úhlu od 100-130 stupňů.
6. Vyberte si vaši oblíbenou funkci (masáž) a její sílu. Stiskněte tlačítko funkce pro výběr masáže. Stiskněte tlačítko "Strength" (síla) pro výběr síly tlaku vzduchu.

Korekce pánve

Vzduchové polštáře na opěrkách paží a sedáku mohou masírovat pánev a upraví tak nerovnosti v pánevní oblasti.

Beauty tvarování

Vzduchové polštáře hnětou obě strany pánve a tím mohou snížit nadbytečný tuk v oblasti boků a pasu. Vzduchové zádové polštáře masírují vaše svaly a formují oblast pasu.

Protážení

Vzduchové polštáře paží stlačí střídavě každou stranu pánve a tím natáčí váš pas. Pomocí hnětoucí masáže zadních vzduchových polštářů protáhnete svaly těla.

Auto

Přeorganizujte výše uvedené funkce a vytvořte si efektivní masážní styl pro vytvarování postavy.

7. Zastavení

Jeden masážní cyklus běží po dobu 15 minut. Když uběhne stanovená doba, je to konec funkce masáže.

8. Vypněte napájení. Odpojte zástrčku ze zásuvky.

9. Složení

Uvolněte háček na zadní části, složte křeslo pomalu zpět až je opěrka zad položena na sedáku. Nevkládejte prsty do mezery mezi zádovou opěrkou a sedák.

Za normálních okolností neskládejte židli během každodenního používání.



Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Křeslo nefunguje	Zástrčka je odpojená	Vložte zástrčku
	Adaptér je odpojený	Připojte adaptér
	Hlavní vypínač je vypnutý	Zapněte hlavní vypínač
Průběh masáže je přerušovaný	Masážní cyklus skončil	Po 30 minutách zrestartujte křeslo
Křeslo je během provozu příliš hlučné	Vzduchové vaky se nafukují/vyfukují	Není vyžadována žádná akce.

Specifikace

Popis	Hanscraft Levante
Model	LT 308
Hodnota el. napětí	220V-240V 50/60Hz
Časovač	15 min
Napájení	55W
Velikost	75(d)x67(š)x95(v) cm
Váha	31 kg
Vnější kryt	Polyuretan
Vhodné pro	Osoby s váhou pod 100kg

Záruka

V případě závady kontaktujte svého prodejce, mějte s sebou i doklad o zaplacení. Po uplynutí doby jednoho roku, ke dni zakoupení masážního křesla, provedeme zdarma opravu, pokud došlo k závadě na výrobku. Po uplynutí záruční doby je veškerý servis zpoplatněný. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným čištěním nebo skladováním, nesprávným používáním, nebo nadměrným taháním kabelu a zástrčky.

Údržba



Odstraňte prach pomocí vhodného lapače prachu. Křeslo nečistěte pokud je zapnuté, nebo dojde k poškození jeho částí. Očistěte ovladač pomocí měkkého hadříku. Pokud je křeslo znečištěné, otřete ho navlhčeným hadříkem nebo za použití saponátu s neutrálním pH. Vytřete do sucha pomocí suchého hadříku. Křeslo neomývejte a nesprejujte na něj vodu.

Upozornění: křeslo sami nedemontujte.

Varování: zástrčku nevytahujte mokrou rukou. Křeslo sami nedemontujte nebo neopravujte.

Upozornění: křeslo před čištěním odpojte ze zásuvky.

Křeslo nečistěte pomocí technického benzínu, změkčovače nebo alkoholu.

Péče a uskladnění

Po použití a před uskladněním křeslo očistěte pomocí hadříku.

Křeslo před uskladněním zakryjte ochranným obalem, aby se na něm neukládal prach.

Křeslo neuskładňujte na horkém, vlhkém a prašném místě. Vyhněte se přímému vystavení křesla na slunci.